
## 睡眠ステージ判定 レポート

## 1) データ情報

データファイル名	Sample.edf			
収録開始時刻 (RS)	2012/11/10 01:35:57	収録終了時刻 (RE)	2012/11/10 07:03:27	
収録時間 (TRP)	5時間28分			

## 2) 睡眠経過図 (ヒプノグラム)

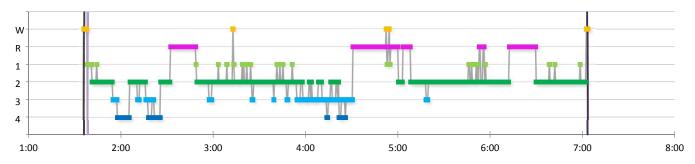

## 3) 睡眠パラメータ

統計データ					
	計算内容	値			
睡眠効率 (SE)	TST / SPT	99.5	(%)		
中途覚醒の割合	WASO / SPT	0.5	(%)		
総就床時間 (TIB)	RE - RS	328.0	(min)		
睡眠時間(SPT)	LSP - SO	324.0	(min)		
総睡眠時間(TST)	SPT内の REM + NREM(1, 2, 3, 4)	322.5	(min)		
中途覚醒時間(WASO)	SPT内のWake	1.5	(min)		
入眠潜時(SL)	SO - RS	2.5	(min)		
REM潜時	SOからの潜時	54.0	(min)		

各パラメータ			
	時刻		
収録開始時刻 (RS)	2012/11/10 01:35:57		
就床時刻 (BI)	2012/11/10 01:35:57		
睡眠開始時刻(SO)	2012/11/10 01:38:27		
最終覚醒時刻(LSP)	2012/11/10 07:01:57		
収録終了時刻 (RE)	2012/11/10 07:03:27		

各ステージ合計時間	(総就床時間 (TIB)内)	
	計算内容	合計時間 [min]
Wake 総時間	Stage Wake	5.5
REM 総時間	Stage REM	68.0
NREM 総時間	NREM = Stage1 +2 + 3 + 4	254.5
浅睡眠 総時間	Stage1 + Stage2	198.0
深睡眠 総時間	Stage3 + Stage4	56.5

REMステージのエピソード周期情報 (睡眠時間(SPT)内)						
	開始時刻	持続時間 [min]	SOからの潜時			
第1周期	2012/11/10 02:32:27	17	0:54:00			
第2周期	2012/11/10 04:30:57	38	2:52:30			
第3周期	2012/11/10 05:52:57	37.5	4:14:30			
第4周期						
第5周期						
第6周期						
第7周期						
第8周期						
第9周期						
第10周期						

エピソードの統計情報							
ステージ	総就床時間 (TIB) 内		睡眠時間(SPT) 内			総睡眠時間(TST) 内	
×1-2	回数	持続時間の平均 [min]	占有率 [%]	回数	持続時間の平均 [min]	占有率 [%]	占有率 [%]
W	11	5.5	1.68	3	1.5	0.46	_
R	136	68.0	20.73	136	68.0	20.99	21.09
1	31	15.5	4.73	31	15.5	4.78	4.81
2	365	182.5	55.64	365	182.5	56.33	56.59
3	78	39.0	11.89	78	39.0	12.04	12.09
4	35	17.5	5.34	35	17.5	5.40	5.43